

Przeznaczenie: OptiPen® Pro jest wstrzykiwaczem wielokrotnego użytku. Jest on przeznaczony do stosowania przez pacjentów chorych na cukrzycę do wstrzykiwania insuliny. Wstrzykiwacz jest przeznaczony do osobistego użytku, nie możesz korzystać z niego wspólnie z innymi osobami.

Szanowny Pacjencie!

Z wstrzykiwaczem OptiPen® Pro stosuje się wkłady insulinowe o objętości 3-ml IU 100 (100 jednostek międzynarodowych na ml) wytwarzane przez Aventis Pharmaceuticals Inc., przeznaczone do stosowania we wstrzykiwaczach OptiPen® Pro. OptiPen® Pro jest dostępny w dwóch wersjach:

- OptiPen® Pro1: skalowany co 1 jednostkę w zakresie 1 – 60 I.U.
- OptiPen® Pro2: skalowany co 2 jednostki w zakresie 2 – 60 I.U.

Jeśli potrzebujesz dawki większej niż 60 I.U., powinienes podać ją w więcej niż jednym wstrzyknięciu.

Niniejsza ulotka informacyjna wyjaśnia sposób użycia wstrzykiwacza OptiPen® Pro oraz opisuje na co należy zwracać uwagę podczas wstrzykiwania insuliny. Więcej pomocnych informacji znajdziesz na odwrocie niniejszej ulotki w punktach:

- A. Uwagi ogólne
- B. Rozwiązywanie problemów
- C. Sposób przechowywania
- D. Inne informacje

Jeżeli wystąpi problem z wstrzykiwaczem OptiPen® Pro, proszę przejść do części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów”. Proszę dokładnie zapoznać się z całą Ulotką informacyjną przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza OptiPen® Pro. Proszę zachować ulotkę na przyszłość tak, aby móc z niej korzystać podczas każdego użycia wstrzykiwacza OptiPen® Pro.

Proszę omówić prawidłowy sposób wstrzykiwania z lekarzem przed użyciem wstrzykiwacza OptiPen® Pro. Jeśli masz problemy z widzeniem, stosuj wstrzykiwacz OptiPen® Pro tylko wtedy, gdy możesz skorzystać z pomocy przeszkolonej osoby z dobrym wzrokiem.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania na temat wstrzykiwacza OptiPen® Pro, zwróć się do swojego lekarza, pielęgniarki diabetologicznej lub farmaceuty.

1 Zakładanie nowego wkładu z insuliną



A Odkręć nasadkę wstrzykiwacza...



... a następnie odkręć oprawkę wkładu od korpusu wstrzykiwacza.

Zdejmij zużytą igłę (jeśli jest założona) wraz z nasadką ochronną. Wyjmij pusty wkład (jeśli jest).



B Wciśnij okrągły przycisk startu, aby uwolnić przycisk do ustawiania dawki.



Na cyfrowym wyświetlaczu dawki pojawi się „00”.



C Trzymaj wstrzykiwacz OptiPen® Pro pionowo tak, aby przycisk do ustawiania dawki był skierowany ku podłodze. Przekręć przycisk do ustawiania dawki w lewo do oporu aż pojawi się „-”. Tłoczek z powrotem schowa się w korpusie wstrzykiwacza. Jeśli tłoczek nie schowa się zupełnie, ostrożnie potrząśnij wstrzykiwaczem, aż tłoczek schowa się. Nie wciskaj tłoczka z powrotem do korpusu wstrzykiwacza.



D Trzymaj wstrzykiwacz OptiPen® Pro w takiej samej pozycji, jak w punkcie C i przekręć przycisk do ustawiania dawki w prawo aż poczujesz opór. Pamiętaj, żeby nie odwracać wstrzykiwacza.



Tłoczek jest teraz zablokowany. Aby sprawdzić, że tłoczek jest zablokowany, przekręć wstrzykiwacz do góry nogami tak, żeby przycisk do ustawiania dawki był skierowany ku górze. Tłoczek nie powinien wysuwać się z korpusu wstrzykiwacza.



E Włóż nowy, nieużywany wkład do oprawki wkładu, mocno przykręć oprawkę wkładu z powrotem do korpusu wstrzykiwacza.



Teraz musisz założyć igłę (punkt 2) i wykonać test bezpieczeństwa (punkt 3) przed użyciem lub odłożeniem wstrzykiwacza.

Pamiętaj o zdjęciu igły przed odłożeniem wstrzykiwacza. Nie przechowywać w lodówce!

2 Zakładanie igły

Zawsze zakładaj nową igłę przed każdym zastrzykiem i testem bezpieczeństwa (Na odwrocie ulotki przedstawiono dozwolone rodzaje igieł).



A Zdejmij ochronną folię z igły.




B Załóż nową igłę bezpośrednio na oprawkę wkładu (przykręć lub wciśnij w zależności od rodzaju igły)



C Zdejmij zewnętrzną nasadkę ochronną z igły.



D Mieszanie: dotyczy tylko zawiesin insuliny (patrz etykieta wkładu).

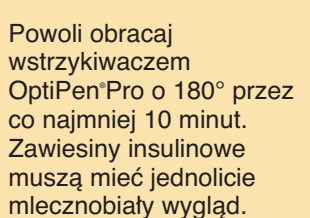

Powoli obracaj wstrzykiwaczem OptiPen® Pro o 180° przez co najmniej 10 minut. Zawiesiny insulinowe muszą mieć jednolicie mlecznobiałą wygląd.

3 Kontrolny test bezpieczeństwa


Więcej informacji o wkładzie i usuwaniu pęcherzyków powietrza na odwrocie ulotki.



A Wciśnij przycisk startu, aby uwolnić przycisk do ustawiania dawki.




B Na cyfrowym wyświetlaczu dawki pojawi się „00”.

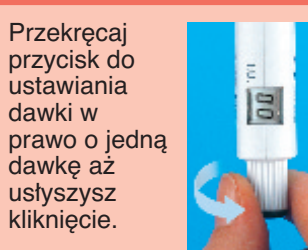


C Przekręć przycisk do ustawiania dawki w prawo o jedną dawkę aż usłyszysz kliknięcie.

UWAGA: Jeśli po założeniu nowego wkładu przycisk do ustawiania dawki trudno się obraca, sprawdź, czy

- tłoczek jest zablokowany w miejscu (patrz punkt 1, część C i D),
- oprawka wkładu z insuliną jest mocno przykręcona (patrz punkt 1, część E) oraz
- przekręciłeś przycisk do ustawiania dawki we właściwym kierunku (w prawo)

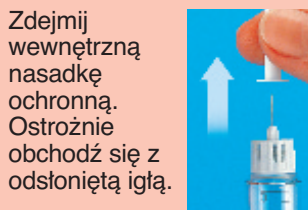

D Zdejmij wewnętrzną nasadkę ochronną. Ostrożnie obchodź się z odsłoniętą igłą.

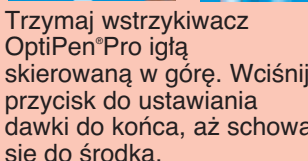

E Trzymaj wstrzykiwacz OptiPen® Pro igłą skierowaną w górę. Wciśnij przycisk do ustawiania dawki do końca, aż schowa się do środka.

Na końcu igły powinna pojawić się insulina. Jeśli tak nie jest, sprawdź igłę i powtórz test bezpieczeństwa. Test bezpieczeństwa należy przeprowadzać przed każdym zastrzykiem.

Wstrzykiwacz OptiPen® Pro jest teraz gotowy do użycia (punkt 4) lub można go przechowywać po zdjęciu igły i założeniu nasadki.

Nie trzymać w lodówce!

4 Ustawianie dawki



A Wciśnij przycisk startu. Przycisk do ustawiania dawki wysuwa się.




B Przekręć przycisk do ustawiania dawki w prawo aż do momentu pojawienia się żądanej dawki. Musisz czuć lub słyszeć kliknięcie podczas tej czynności. Jeżeli wybrałeś zbyt wysoką dawkę, przekręć przycisk do ustawiania z powrotem w lewo. Jeśli liczby na wyświetlaczu nie występują we właściwej kolejności, przestań korzystać z tego wstrzykiwacza OptiPen® Pro i zaopatrz się w nowy.

UWAGA: Jeśli przycisk do ustawiania dawki nie chce się dalej przesuwac, najprawdopodobniej wkład nie zawiera wystarczającej ilości insuliny, żeby uzyskać potrzebną Ci dawkę. **Nie przekręcaj przycisku do ustawiania dawki na siłę.** Załóż nowy wkład z insuliną.

5 Wstrzykiwanie dawki



A Umyj miejsce wstrzyknięcia na skórze (np. przecierając je alkoholem). Wbij igłę i zastosuj technikę wstrzykiwania zalecaną przez Twojego lekarza.

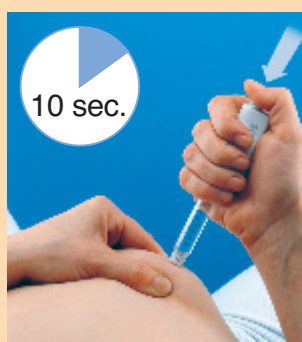

B Wciskaj przycisk do ustawiania dawki powoli i do końca aż wejdziesz on do środka. Wolno policz do 10 przytrzymując przycisk do ustawiania dawki zanim wyjmiesz igłę.

Nie wciskaj bez potrzeby przycisku startu.

6 Usuwanie igły



A Ostrożnie załóż zewnętrzną nasadkę ochronną na igłę.



B Całkowicie odkręć igłę po każdym zastrzyku. Pozbądź się jej w bezpieczny sposób i zgodnie z zaleceniami producenta. Zawsze załóż nasadkę na korpus wstrzykiwacza po użyciu.

Wstrzykiwacz OptiPen® Pro można przechowywać w ten sposób do następnego użycia.

Nie przechowywać w lodówce!

Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności

Igły
Przed wykonaniem każdego kontrolnego testu bezpieczeństwa, a następnie zastrzyku należy założyć nową, jałową igłę (z nienaruszoną folią ochronną). Zapobiega to zatykaniu się igły i tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Dla ochrony przed zranieniem załóż zewnętrzną nasadkę ochronną przed zdjęciem i pozbyciem się zużytych igieł.

Kontrolny test bezpieczeństwa
Przed każdym zastrzykiem załóż nową igłę i przeprowadź test bezpieczeństwa (część 3) zabezpieczający przed błędnym dawkowaniem. Podanie niewłaściwej dawki może wywołać niekorzystne zmiany poziomu cukru we krwi (patrz ulotka dołączona do opakowania insuliny). Nie wykonuj testu bezpieczeństwa bez założonej igły.

Wkłady
Przy zmianie wkładu zawsze ustaw tłoczek w pozycji startowej zgodnie z instrukcjami. Nigdy nie zakładaj używanego wkładu ani nie używaj ponownie wkładu po wyjęciu go z oprawki na wkład.

Uszkodzenie wstrzykiwacza OptiPen® Pro
Uszkodzony wstrzykiwacz nie jest bezpieczny w użyciu i należy zaopatrzyć się w nowy. Wstrzykiwacz OptiPen® Pro może ulec uszkodzeniu w wyniku nieostrożnego obchodzenia się, upuszczenia lub przekręcenia przycisku do ustawiania dawki na siłę. Należy dopilnować, by brud nie miał kontaktu z częściami mechanicznymi. Jeśli nastąpi którekolwiek z tych zdarzeń, sprawdź, czy

- a) Wkład nie jest uszkodzony.
- b) Przycisk startu, przycisk do ustawiania dawki i cyfrowy wyświetlacz dawki wciąż działają prawidłowo.

Nie stosować narzędzi w celu naprawienia wstrzykiwacza OptiPen® Pro. Jeśli nie jesteś pewien, czy jest on uszkodzony, skontaktuj się z lekarzem, pielęgniarką diabetologiczną lub farmaceutą.

W nagłych przypadkach możesz pobrać insulinę z wkładu przy pomocy odpowiedniej strzykawki insulinowej U-100.

Wstrzykiwacza OptiPen® Pro nie należy używać w pobliżu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

A UWAGI OGÓLNE

B ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

C SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

D INNE INFORMACJE

Wkład
3 ml wkład jest sprzedawany osobno. Przed każdym wstrzyknięciem sprawdź wygląd leku we wkładzie i stosuj się do instrukcji w ulotce informacyjnej leku dla pacjenta. Dla uniknięcia problemów (np. zakażeń, nieprawidłowego dawkowania) ważne jest przestrzeganie poleceń zawartych w niniejszej ulotce informacyjnej. Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed użyciem wkładu z insuliną we wstrzykiwaczu OptiPen®Pro.


Przed użyciem schłodzonego wkładu, wyjmij go z lodówki na pewien czas (około 1-2 godzin), żeby osiągnął temperaturę pokojową. Chroń go przed zabrudzeniem. Nie wyjmuj wkładu z opakowania zanim nie będzie gotowy do użycia. Przetrzyj górną część wkładu wacikiem z alkoholem przed każdym założeniem igły. Nie otwieraj wkładu ani nie manipuluj nim w żaden sposób. Nie wkładaj częściowo zużytych wkładów do wstrzykiwacza.


Igły do wstrzykiwacza OptiPen®Pro
Igły różnej długości i grubości są dostępne. Skontaktuj się z farmaceutą, aby uzyskać więcej informacji. Proszę sprawdzić w instrukcji dołączonej do opakowania igieł. W różnych krajach igły i wstrzykiwacze mogą się różnić i nie być zamienne. Jeśli planujesz podróż za granicę, upewnij się, że zabrałeś wystarczający zapas igieł ze sobą.

Usuwanie pęcherzyków powietrza
Pęcherzyki powietrza usuwa się podczas kontrolnego testu bezpieczeństwa (punkt 3). Jeśli pęcherzyki powietrza wciąż występują, powtórz test bezpieczeństwa obracając przycisk do ustawiania dawki w prawo aż na wyświetlaczu pojawi się „02”. Delikatnie opukaj oprawkę wkładu do momentu, gdy powietrze przesunie się ku górze szyjki wkładu. Następnie wciśnij przycisk do ustawiania dawki aż

usłyszysz kliknięcie. W razie potrzeby powtarzaj test do momentu pojawienia się insuliny na końcu igły.

Regulacja dawki i wyświetlacz
W celu ustawienia dawki trzymaj wstrzykiwacz OptiPen®Pro w sposób opisany w punkcie 4. W lewo od cyfrowego wyświetlacza dawki muszą być widoczne drukowane litery I.U. Po ustawieniu dawki będzie ona wyświetlana przez 2 minuty.

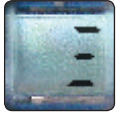Informacje dotyczące okresu trwałości
 **miga po naciśnięciu przycisku startu:**
Okres trwałości (2 lata) Twojego wstrzykiwacza OptiPen®Pro dobiega końca. Cyfrowy wyświetlacz dawki będzie dalej działał przez około 4 tygodnie. Zaopatr się w nowy wstrzykiwacz.

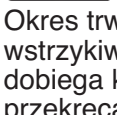 **miga, gdy wciśnię się przycisk startu:**
Okres trwałości wstrzykiwacza OptiPen®Pro dobiega końca. Gdy dalej przekreślasz przycisk ustawiania dawki, wyświetlacz wciąż pokazuje . Zaopatr się w nowy wstrzykiwacz OptiPen®Pro.

W sytuacji nagłej,
a) możesz pobrać insulinę z wkładu przy pomocy odpowiedniej strzykawki insulinowej U-100.
b) jeśli nie masz strzykawki, możesz tymczasowo ustawić dawkę insuliny licząc kliknięcia. Zależnie od stosowanej przez Ciebie wersji wstrzykiwacza OptiPen®Pro, 1 kliknięcie odpowiada 1 lub 2 jednostkom. Jeśli korzystasz z tej możliwości przed wykonaniem zastrzyku konieczne jest wykonanie testu bezpieczeństwa z pozytywnym wynikiem.

Kontrolny test bezpieczeństwa Podczas testu bezpieczeństwa na końcu igły nie pojawia się insulina (punkt 3):
Powtórz test bezpieczeństwa. Jeśli insulina nie pojawi się i tym razem, sprawdź, czy:
a) Igła dobrze się trzyma na swoim miejscu. Wymień zatkaną lub uszkodzoną igłę na nową.
b) Przycisk do ustawiania dawki został prawidłowo ustawiony (zawsze przekreślaj ten przycisk w prawo, aby wybrać dawkę). Przesuń przycisk o 1 jednostkę w prawo.
c) Wkład jest założony prawidłowo. Jeśli wkład z insuliną jest pusty, załóż nowy (punkt 3). Powtórz kontrolny test bezpieczeństwa (punkt 3).

Podczas ustawiania dawki nie słyszysz kliknięcia:
Zaopatr się w nowy wstrzykiwacz OptiPen®Pro (z gwarancją).

Ustawianie dawki Podczas ustawiania dawki insulina kapie z końca igły:
Maksymalna dawka dla wstrzykiwacza OptiPen®Pro wynosi 60 jednostek. Jeśli po osiągnięciu 60 jednostek będziesz dalej przekreślać przycisk do ustawiania dawki, insulina będzie kapiała z końca igły, zaś cyfrowy wyświetlacz wciąż będzie pokazywał liczbę „60”. Wówczas podana zostanie dawka 60 jednostek insuliny (jak pokazuje wyświetlacz). Jeśli potrzebujesz niższej dawki, przekreśl przycisk do ustawiania dawki z powrotem (w lewo), aby obniżyć dawkę.

Wstrzykiwacz zaczyna się lub czujesz opór podczas ustawiania dawki, a przycisk do ustawiania dawki nie chce przesunąć się dalej do przodu:

a. Wkład jest prawie pusty i nie zawiera już wystarczającej ilości insuliny dla uzyskania potrzebnej dawki. Możesz wybrać jeden z poniższych sposobów postępowania:

• Nie przekreślaj przycisku do ustawiania dawki na siłę w prawo. Wstrzyknij część dawki, wymień wkład i wstrzyknij resztę dawki tak, aby uzyskać całą przepisaną dawkę. LUB
• Załóż nowy wkład (patrz punkt 1, 2 i 3).
b. Jeśli przycisk do ustawiania dawki nie obraca się po założeniu nowego wkładu, **nie przekreślaj** go na siłę. Upewnij się, czy:
• Tłoczek jest unieruchomiony (patrz punkt 1, część C i D)
• Oprawka na wkład jest dobrze przykręcona do korpusu (patrz punkt 1, część C)
• Obracasz przycisk we właściwym kierunku (patrz punkt 3, część C)

c. Sprawdź, czy podczas ustawiania dawki przycisk do ustawiania dawki nie znajduje się pomiędzy dwoma stopniami dawki. Przesuwaj przycisk w prawo lub w lewo w kierunku pożądanej dawki, aż usłyszysz kliknięcie.

d. Sprawdź, czy igła jest założona prawidłowo (patrz punkt 2, część B), czy nie jest zablokowana lub zgięta (patrz „Rozwiązywanie problemów – Test bezpieczeństwa”). Musisz używać nowej, jętowej igły do każdego zastrzyku. Zapobiega to blokowaniu się igły i powstawaniu pęcherzyków powietrza.

e. Przekreśliłeś przycisk (w prawo) za maksymalną dawkę 60 IU i nie założyłeś igły (lub igła jest zablokowana). Przekreśl go z powrotem (w lewo) do pozycji „00” i wykonaj czynności opisane w punkcie 2 i 3. Nie przekreślaj przycisku do ustawiania dawki dalej na siłę.

Przycisk do ustawiania dawki nie wychodzi po wciśnięciu przycisku startowego:
Zaopatr się w nowy wstrzykiwacz Optipen®Pro.

Wymiana wkładu Przycisku do ustawiania dawki nie można prawidłowo przykręcić do korpusu wstrzykiwacza.

Sprawdź, czy:
a. Pozwoliłeś, aby tłoczek schował się w korpusie. Wyjmij wkład i postępuj zgodnie z punktem 1. Przeprowadź test bezpieczeństwa (punkt 3).
b. Wkład jest prawidłowo założony (węższym końcem z metalową osłonką w kierunku korpusu wstrzykiwacza).

Tłoczek nie wchodzi z łatwością w swoje miejsce:
a. Trzymaj wstrzykiwacz OptiPen®Pro przyciskiem do ustawiania dawki w dół (patrz punkt 1) i delikatnie potrząśnij, aby tłoczek mógł łatwiej wsunąć się do korpusu wstrzykiwacza.

b. Jeśli tłoczek nie chowa się zupełnie w korpusie, problem może dotyczyć korpusu wstrzykiwacza. Nie próbuj naprawiać wstrzykiwacza OptiPen®Pro. Zaopatr się w nowy.

Wstrzykiwanie insuliny Przycisku do ustawiania dawki nie można wcisnąć w celu wstrzyknięcia insuliny lub nie wchodzi on w swoje miejsce (patrz punkt o zablokowaniu):

a. Podczas ustawiania dawki mogłeś przekreślić przycisk ustawiania dawki tak, że znalazł się on pomiędzy dwoma stopniami dawki. Przekreśl przycisk w prawo lub lewo w kierunku pożądanej dawki.

b. Igła może być zatkana lub uszkodzona. Użyj nowej igły.

c. Mogłeś nieumyślnie wcisnąć przycisk startu.

Po wyjęciu igły ze skóry wypływa z niej więcej niż jedna kropla insuliny:
Możliwe, że nie wstrzyknałeś całej dawki insuliny. NIE próbuj uzupełnić brakującej insuliny przez wykonanie drugiego zastrzyku (w przeciwnym razie może Ci grozić spadek poziomu cukru we krwi). Sprawdź, jaki masz poziom cukru we krwi i skonsultuj się z lekarzem. Możesz uniknąć powtórzenia się tego problemu podejmując

następujące kroki:
a. Usuń wszelkie pęcherzyki powietrza, które mogą się znajdować we wkładzie z insuliną (patrz „UWAGI OGÓLNE: Usuwanie pęcherzyków powietrza”).
b. Powoli wciśnij przycisk do ustawiania dawki do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Wcisnąc przycisk wolno policz do 10 przed wyjęciem igły ze skóry

Funkcje wyświetlacza dawki

Pojawia się przycisk do ustawiania dawki do ujemnego zakresu.
Przekreślaj przycisk do ustawiania dawki w prawo, aż pojawi się „00”. Wówczas powinienes zawsze przeprowadzić Test bezpieczeństwa (punkt 3).

Na przemian migają

a. Przesunąłeś przycisk do ustawiania dawki do ujemnego zakresu lub rozpocząłeś od ujemnego zakresu. NIE WYKONUJ zastrzyku, lecz przeprowadź kontrolny test bezpieczeństwa (punkt 3)
b. Przesunąłeś przycisk do ustawiania dawki zbyt szybko podczas ustawiania dawki insuliny. Możesz to skorygowaćoczynając od początku. W tym celu wciśnij najpierw przycisk do ustawiania dawki.

Dawka nie jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku startu lub zwolnieniu przycisku do ustawiania dawki:
Wciśnij przycisk do ustawiania dawki. Zacznij od kontrolnego testu bezpieczeństwa (punkt 3). Jeśli dawka wciąż nie jest wyświetlana, powinienes nabyć nowy wstrzykiwacz OptiPen®Pro.

Wyświetlana dawka znika podczas ustawiania dawki (np. jeśli coś Ci przeszkodzi w trakcie przygotowywania zastrzyku):
Automatycznie włączyła się funkcja oszczędzania energii. Przesuń przycisk do ustawiania dawki o jedną jednostkę do przodu. Wstrzykiwacz powinien być teraz znów gotowy do użyciu, sprawdź, czy wyświetlacz pokazuje prawidłową dawkę.

Informacje o bateriach

 **miga po wciśnięciu przycisku startu:**
Bateria się wyczerpuje. Możesz używać wstrzykiwacz OptiPen®Pro, ale proszę, zaopatr się w nowy wstrzykiwacz OptiPen®Pro

 **wyświetla się po wciśnięciu przycisku startu:**
Bateria się wyczerpała. Użyj nowego wstrzykiwacza OptiPen®Pro

W sytuacji nagłej,
a. możesz pobrać insulinę z wkładu przy pomocy odpowiedniej strzykawki insulinowej U-100.

b. jeśli nie masz strzykawki, możesz tymczasowo ustawić dawkę insuliny licząc kliknięcia. Zależnie od stosowanej przez Ciebie wersji wstrzykiwacza OptiPen®Pro, 1 kliknięcie odpowiada 1 lub 2 jednostkom. Jeśli korzystasz z tej możliwości, przed wykonaniem zastrzyku jak zawsze konieczne jest wykonanie testu bezpieczeństwa z pozytywnym wynikiem.

Zawsze przechowuj wstrzykiwacz OptiPen®Pro bez igły w temperaturze pokojowej poniżej 25°C (nigdy w lodówce) i chroń przed wilgocią. Na czas przechowywania wstrzykiwacza OptiPen®Pro, wciśnij przycisk do ustawiania dawki do środka. Pozwala to oszczędzać baterię i umożliwia właściwe funkcjonowanie wstrzykiwacza przez cały jego okres trwałości.

Aby zapobiec dostawianiu się kurzu do korpusu wstrzykiwacza, zawsze zakładaj nasadkę na wstrzykiwacz.

Od momentu założenia wkładu na wstrzykiwacz OptiPen®Pro po raz pierwszy, wkład ten może być używany najwyżej przez 28 dni w normalnych warunkach użytkowania (w temperaturze pokojowej poniżej 25°C). Szczegółowe informacje na temat przechowywania wkładu można znaleźć w ulotce informacyjnej dla pacjenta.

Pielęgnacja
Ostrożnie obchodź się ze wstrzykiwaczem OptiPen®Pro. Aby utrzymać go w czystości, posługuj się wilgotną szmatką. Brud może utrudniać działanie. NIE UŻYWAJ środków czystości. Wstrzykiwacz OptiPen®Pro nie wymaga konserwacji.

Okres trwałości
Okres trwałości wstrzykiwacza OptiPen®Pro wynosi 2 lata. Szczegóły w punkcie “A. Uwagi ogólne. Informacje na temat okresu trwałości”. OptiPen®Pro spełnia wymagania normy DIN EN ISO 11608-1.

Wytwórca
Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Germany. CE 0123

Dystrybutor
Aventis Pharma Sp. z o.o. 03-230 Warszawa ul. Daniszewska 10 tel. (0-22) 676-06-07

OptiPen®Pro jest zastrzeżonym znakiem hanlowym grupy Aventis.

Data opracowania instrukcji użycia:

Marzec 22, 2004

